
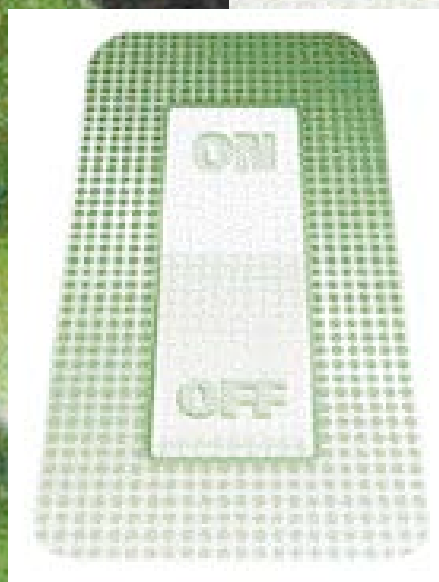


OPSITE

- sårfilmen med många möjligheter

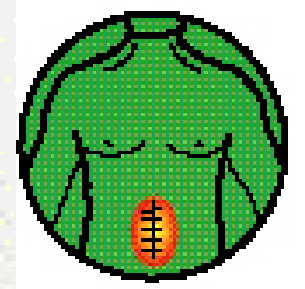


Nyhet!

OPSITE

Post-Op

Byt till det postoperativa filmförbandet som kan hantera stora mängder sårsekret

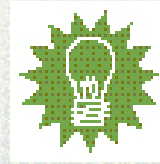

Reactic* sårfilm


Är en patenterad teknologi som gör att sårfilmen reagerar när den kommer i kontakt med fukt.

Nya OpSITE Post-Op är ett revolutionerande postoperativt förband. Detta filmförband kombinerar en hög MVTR (Moisture Vapor Transmission Rate = genomsläpplighet av vattenånga), 3000g/m²/24 tim med en komfortabel, absorberande sårdyna och ett enkelt applikationssystem. Den hydrofila polyuretanfilmen har REACTIC*-egenskaper vilket gör att filmen, vid förekomst av fukt, kan starta genomsläppligheten av vattenånga samt stänga av om sekretionen minskar.



Högabsorberande sårdyna

Sårkontaktlager som inte fastnar i såret

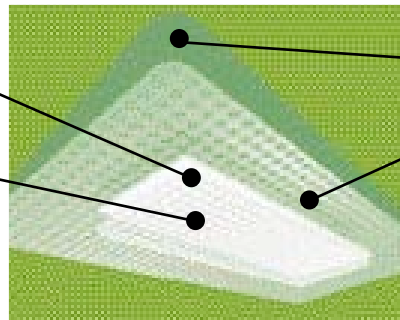

Rundade hörn

Film med hög MVTR (genomsläpplighet av vattenånga)

Det postoperativa filmförbandet som kan hantera stora mängder sårsekret



OPSITE Post-Op ger följande fördelar:



Bakteriebarriär

Skyddar såret från yttre kontamination vilket reducerar risken för infektion.



Vattentät film

Patienten kan sköta sin hygien och duscha samt bada med förbandet.



Lågallergent häftande lager

Ett unikt rutmönstrat adhesivt lager med lågallergen häftmassa av akrylat.



Högabsorberande sårdyna

Förbandet absorberar snabbt överflödigt sårsekret. Tillåter lateral spridning vilket ytterligare ökar absorptionsförmågan och reducerar risken för maceration (uppluckring av sårkanterna).



Fastnar inte i såret

Sårkontaktlaget tillåter sårsekret att passera igenom till nästa lager. Därmed skyddas sårbädden och förbandsbyten underlättas.



Komfortabelt för patienten

Förbandet är smidigt och formar sig väl efter kroppskonturer vilket gör förbandet komfortabelt för patienten att bära. Patientens rörelse hindras inte och förbandet går utmärkt att duscha med.




Hög MVTR

Den patenterade REACTIC-filmen har en unik molekylstruktur vilket ger en MVTR (genomsläpplighet av vattenånga) på $3000\text{g}/\text{m}^2/24\text{ tim}$. Detta ger ett filmförband med signifikant högre genomsläpplighet än standardfilmer vid förekomst av fukt.



Runda hörn och tunn film

Förbandets form och smidighet gör att OPSITE Post-Op sitter säkert under lång tid utan att lossna.

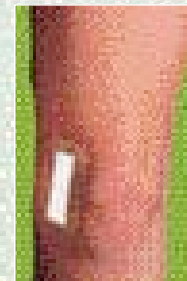

Hur appliceras OpSITE Post-Op?



1. Ta bort ett av skyddspappren märkt "1" innan förbandet appliceras.



2. Placera förbandet över såret och ta bort den andra delen av skyddspappret. Tryck fast förbandet på plats genom att pressa lätt.



3. Avsluta med att ta bort förbandets skyddsfilm märkt "2".

Indikation:

Postoperativa sår, skrapår, rivsår och skärsår.

FÖRPACKNINGSTORLEKAR		
Nummer	Storlek	Antal
66000708	6,5cm x 5cm	100 st
66000709	9,5cm x 8,5cm	20 st
66000710	12cm x 10cm	10 st
66000712	15,5cm x 8,5cm	20 st
66000713	20cm x 10cm	20 st
66000714	25cm x 10cm	20 st
66000715	30cm x 10cm	20 st
66000716	35cm x 10cm	20 st



Nyhet!

OpSITE **Post-Op**

Smith+Nephew

First Choice in Wound Management

Smith & Nephew AB. Box 143, 431 22 Mölndal. Tel 031-746 58 00 . Fax 031-87 05 31.
sn@smith-nephew.se, www.smith-nephew.se