

Det tunna absorberande skumförbandet


- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Formar sig väl efter kroppens konturer och är bekväm att bära

Safetac® yta

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration

Absorberande polyuretanskum

- Absorberar sårsekret
- Fungerar under kompression
- Tunn och formar sig lätt efter kroppens konturer

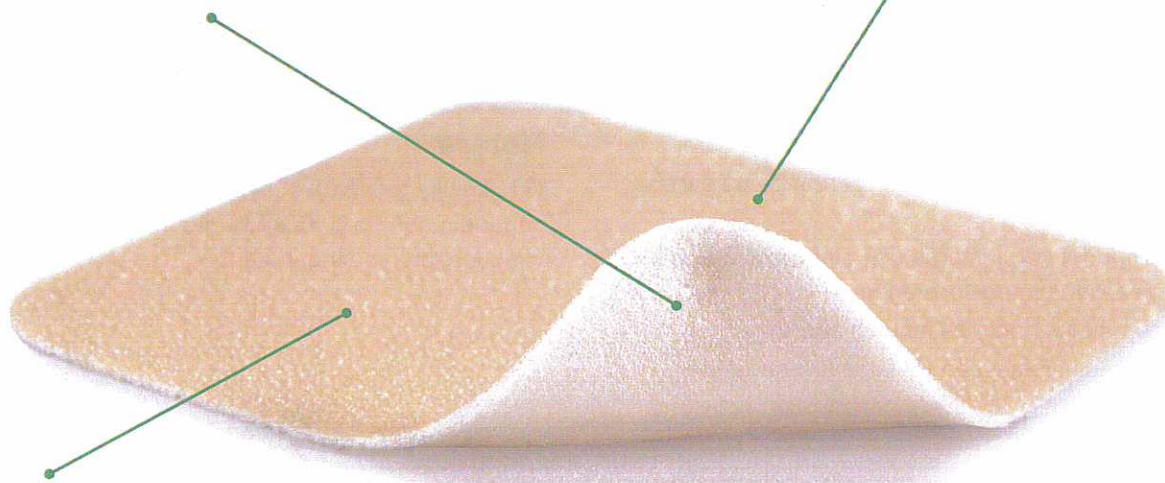

Polyuretanfilm på ovansidan


- Andningsbar
- Virus- och bakteriebarriär *

* mikrober större än 25 nm


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information www.safetac.com

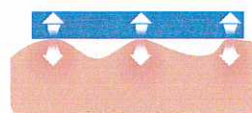


Traditionell vidhäftning fäster endast på hudens översta ytskikt och måste därför vidhäfta aggressivt för att sitta på plats

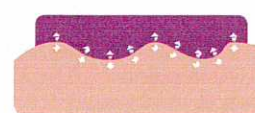


Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring sårkanterna


Så här används Mepilex® Lite

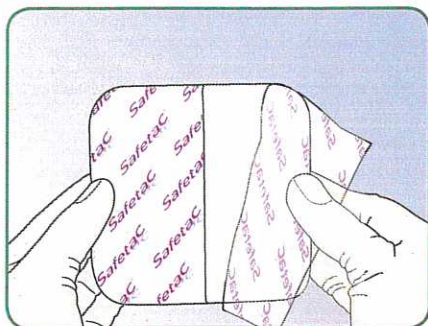

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddspappret.

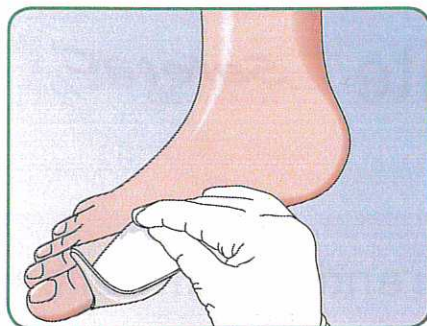

Mepilex Lite bör överlappa den omkringliggande huden med minst 2 cm.
Applicera den vidhäftande sidan mot såret. Sträck ej förbandet.

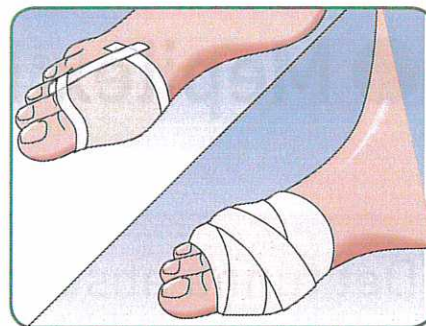

Vid behov, fixera Mepilex Lite med en binda eller annan fixeringsprodukt. (Tubifast, Mefix eller Mepore Film). Vid känslig hud bör Mepitac användas.

Så här fungerar Mepilex Lite

Mepilex Lite är tunt, följsamt och bekvämt skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Förbandet är mycket formbart och flexibelt, vilket gör det väldigt smidigt att arbeta med. Mepilex Lite är enkelt att klippa till för att anpassa till svårbandagerade områden. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Fördelar med Mepilex Lite

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av fixeringslösning
- Fungerar bra under kompression
- Kan ligga kvar på huden vid strålbehandling
- Förbandet är tunt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa svårbandagerade områden
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Låg risk för hudirritation och allergi
- Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten

Användningsområden

Mepilex Lite kan användas på ett stort antal torra till svagt vätskande sår som t.ex. ben- och fotsår, trycksår, traumatiska och smärtsamma sår, strålreaktioner, brännskador och vid Epidermolysis Bullosa (EB). Mepilex Lite kan även användas som skydd på känslig hud.


Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex Lite om lämplig infektionsbehandling inleds.

Mepilex Lite sortiment

(levereras sterila, enslycksförpackade)

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
284000	6 x 8,5	5	70
284100	10 x 10	5	50
284300	15 x 15	5	50
284500	20 x 50	4	24

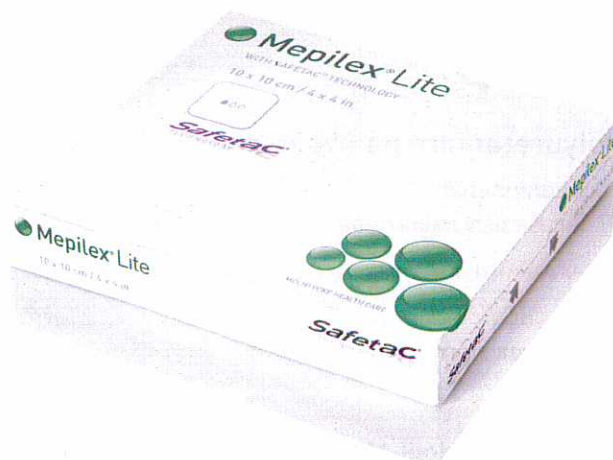

Mer information på www.molnlycke.se

Molnlycke Health Care AB

Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 90 00

www.molnlycke.se

www.molnlycke.se/parent

Molnlycke Health Care AB and its subsidiaries are not responsible for the use of Mepilex Lite.

Molnlycke Health Care AB and its subsidiaries are not responsible for the use of Mepilex Lite.

