


Horizon Clips

- titaniumclips för öppen och endoskopisk kirurgi.

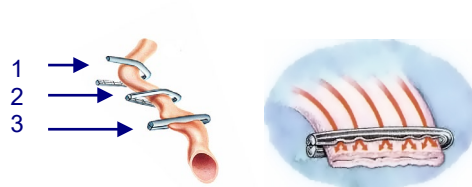

Design

Horizon clips har en unik hästskoform som säkrar en "tip to tip" förslutning. Clipset omsluter hela kärlet innan det stängs (se bild ovan).


De spår och fåror som finns på clipets insida (se bild nedan) tillåter att kärlväggens yttersta skikt (tunica externa) förblir mikroperfunderat, vilket förhindrar vävnadsnekros och clip migration. OBS! mikroperfunderingen sker enbart i det yttersta skicket av kärlväggen, kärlumen förblir fullständigt ligerad!

I clipsens ändar finns små rillor som gör att vävnaden inte glider ur förslutningen.

Ändarna är inte spetsiga/kantiga som på traditionella clips utan de är mer rundade. Detta förhindrar irritation på omkringliggande vävnad.

Genom Horizons clipsform, med en ränna som passar i en kanal i applikatorn käft, minimeras risken för att clipsen tappas efter laddningen. En laddning som är mycket lätt och säker.

Hjärt/triangel
formad tillböjning

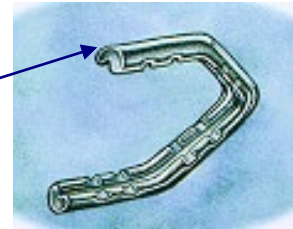

Ränna

Magasin

Clipsen sitter i magasin som är formade så att clipsen inte tappas. De är fästa på ett sådant sätt att de endast kan tas ut med en applikator. Ett säkert sätt som behåller clipsen sterila. Magasinet levereras med dubbelhäftande tejp på undersidan. Härigenom kan kirurgen fästa det på ett lämpligt ställe där det är lättillgängligt.

Teleflex®

Artikelnr.	Färg	Storlek	Antal clips/ magasin	Antal magasin	Totalt antal clips	Anmärkning
60HZ5200		Micro	6	30	180	
60HZ1200		Small	6	30	180	
60HZ1204		Small	24	25	600	
60HZ1201		Small	6	30	180	Bred
60HZ1205		Small	24	25	600	Bred
60HZ2200		Medium	6	30	180	
60HZ2204		Medium	24	25	600	
60HZ3200		Medium/Large	6	20	120	
60HZ3204		Medium/Large	24	15	360	
60HZ4200		Large	6	20	120	
60HZ4204		Large	24	15	360	

Teleflex Medicals applikatorer för öppen- / endoskopisk kirurgi är endast framtagna för Teleflex clips Horizon/Hemolok. Teleflex Medical kan inte garantera säkerheten, om andra fabrikat av clips används i Teleflex applikatorer.


Teleflex®